
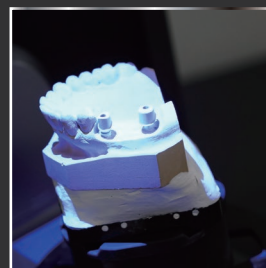


SHINING 3D
DENTAL

AutoScan-DS-MIX


Больше, чем детализация

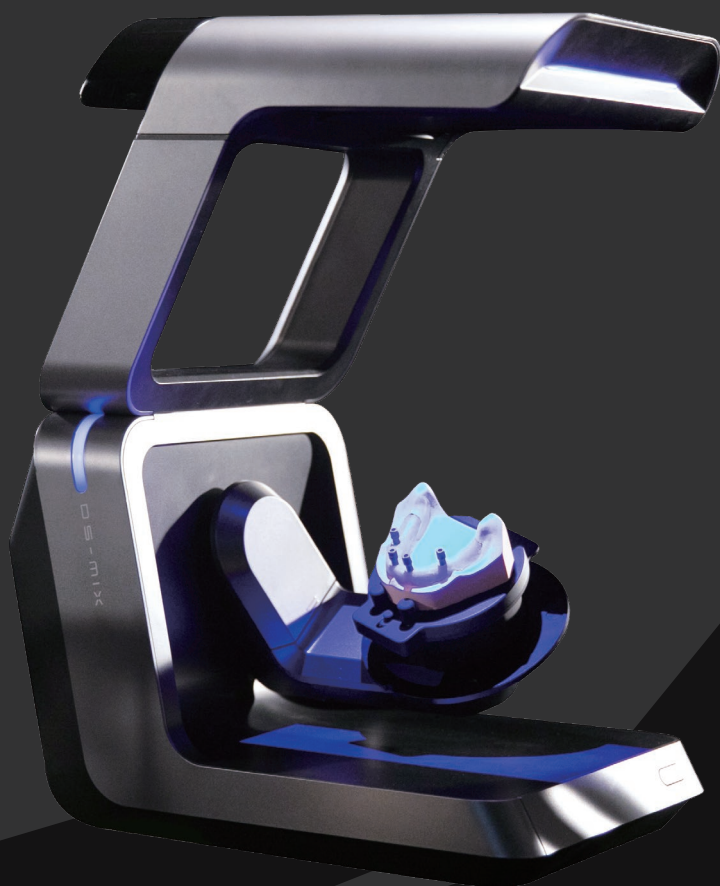


SHINING3DDENTAL.COM

AutoScan-DS-MIX специализируется на стоматологическом 3D сканировании

AutoScan-DS-MIX - это высокоточный стоматологический 3D сканер, разработанный компанией SHINING 3D. С открытым дизайном и модульной структурой, AutoScan-DS-MIX отличается идеальной детализацией, высокой точностью и высокой эффективностью для удовлетворения потребностей пользователей в широком спектре стоматологических изделий, включая коронки & мосты, имплантаты, балки и т.д.

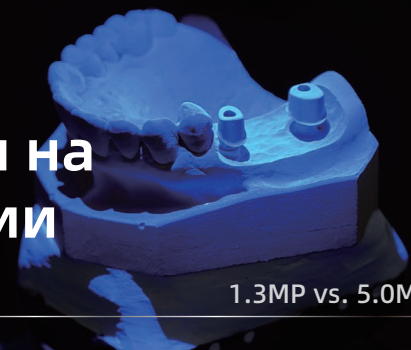

1.3MP vs. 5.0MP

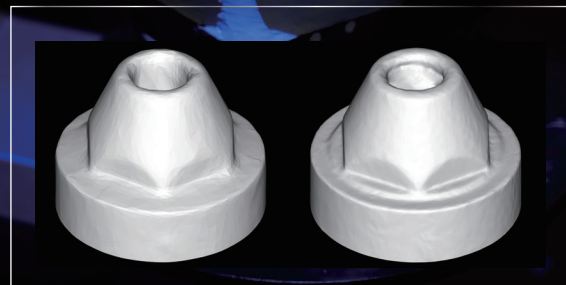

Сверхвысокая детализация

Благодаря двойным камерам высокого разрешения 5,0 МП, AutoScan-DS-MIX может идеально фиксировать краевые линии абатментов и особенности скан-боди.




Высокая точность

Точность сканирования ≤ 7 мкм обеспечивает надежный результат сканирования.



Высокая эффективность

AutoScan-DS-MIX поддерживает режим высокоэффективного сканирования: 13 секунд для сканирования верхней/нижней челюсти. С помощью сканирования Все-в-одном эффективность сканирования может быть увеличена примерно на 30%.

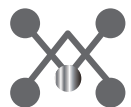

Интеллектуальное сканирование

Интегрированный с удобным интерфейсом, сканированием в один щелчок и интеллектуальным сканированием, AutoScan-DS-MIX предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс.



Высокая совместимость

Экспорт в форматы .stl и .ply, гибкая интеграция в решении CAD / CAM.





Модульная структура

Более удобное обслуживание и возможность модернизации в будущем.


Широкий спектр применений

● 3D сканирование имплантатов

Сохранение деталей края и поверхности;
Оптимизация процесса сканирования имплантата и повышение эффективности сканирования;
Поддержка не только динамического и статического двух режимов сканирования для большинства распространенных артикуляторов, но и поддержка переноса значений для артикуляторов Artex, Kavo, SAM и Bio-Art.

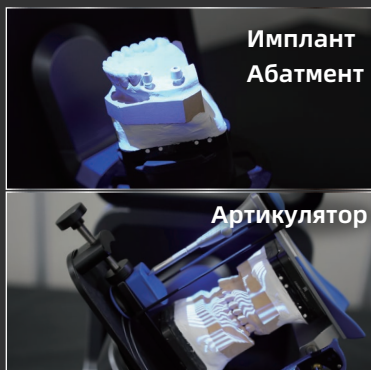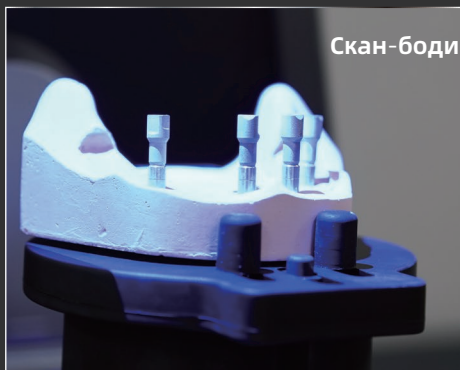

● Неразборная модель

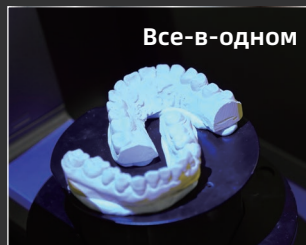

● Двусторонняя ● Текстура ложка



Технические Характеристики

Модель	AutoScan-DS-MIX
Разрешение камеры	2*5.0 мп
Точность	≤7µm (ISO12836)
Время сканирования	Прикус: 6 сек; верхняя/нижняя челюсть: 13 сек; 1-4 штампов: 18 сек; 5-8 штампов: 33 сек; слепок: 32 сек
Сканирование артикулятора	Динамическое / статическое; перенос значений артикулятора
Формат	OBJ, STL, PLY
Источник света	Синий свет
Габариты	238(Д)×340(Ш)×447(В) мм
Вес	7.5 кг
Интерфейс	USB3.0
Источник питания	DC24V

*SHINING 3D оставляет за собой право вносить любые изменения в спецификации и изображения.